

取扱説明書

安全上のご注意


ご使用上の注意

機能と操作

MULTI FACIAL CARE TOOL

マルチフェイシャルケアツール

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。使用前に、本取扱説明書をご確認ください。読み終わった後は、大切に保管してください。

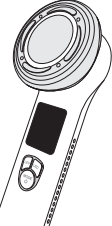

警告と注意のアイコンと説明。警告: 死亡または重傷を負うおそれがある内容。注意: 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容。行為を指示する内容と行為を禁止する内容。

警告

- イヤリング、ピアスやネックレスなど、お顔や首まわりに身につけているアクセサリーは取り外ししてください。
メガネ、コンタクトレンズははずしてください。
経路時に使用しない。
水につけたり、濡れた手で触らない。
分解・改造・修理しない。
火に投入したり、加熱しない。
次のような真鍮が発生した場合、たちちに使用を中止する。
次のような真鍮が発生した場合、適切な処置を行い、適切な処置を行ってください。
充電時に充電機を使用しない。
使用時に充電機を使用しない。
充電時に充電機を使用しない。
充電時に充電機を使用しない。
充電時に充電機を使用しない。

- 本製品を使用する場合は、必ず清潔な状態で使用してください。
●本製品を使用中に体調がわるくなった場合は、たちちに使用を中止してください。
●本製品は自己責任のもとでご利用していただく製品であり、販売者がおそれがあります。
●必ず水事故が発生しないよう、目の周囲等で充電しないでください。
●本製品は長時間使用しない場合、自然放電するため1日以上の充電をおこなってください。

※本製品は一部家庭用器具として扱われる場合があります。
※本製品の使用方法に起因する使用機器の破損・故障などに関して、一切の責任を負いません。
※本製品の故障について、弊社にお電話または、お客様のご負担(送料)にてお送りください。
※本製品の責任および修理費用は、本製品の保証期間内に限り保証いたします。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
●充電時に充電機を接続し、充電中に充電機が正常に動作しない場合は、たちちに使用を中止してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。




●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
●充電時に充電機を接続し、充電中に充電機が正常に動作しない場合は、たちちに使用を中止してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。

充電機は別売りです。別途ご用意ください。

- 充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。

各部名称

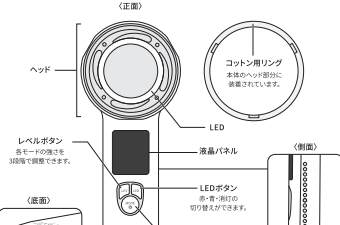

機能と操作表。機能: 電源ON/OFF, モード切り替え, 強さレベル切り替え, LED切り替え・点灯。操作: 電源ボタン(モード切り替えボタン)を長押し, モード切り替えボタン(電源ボタン)を短押し, レベルボタンを短押し, LEDボタンを短押し。

LEDについて

電源ONの状態では、LEDボタンを短押しすると赤色・黄色・青の順でLEDを使用できます。LEDによる光はすべてのモードで使用できます。


LEDカラー

LEDカラー表。赤色: MOISTモード/EMSモード。青色: CLEANモード/COOLモード。

- LEDを使用する際は目を閉じてください。
●LEDを長時間使用する際は、目の負担や肌への負担に注意してください。

バイブレーション(振動)機能について

バイブレーション機能は、本製品のセンサーに接続し、バイブレーション機能を使用することによって、バイブレーション機能がすべてのモードで使用できます。

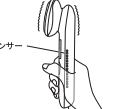

充電する

- はじめに使用する際は、本製品を充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
1. USBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する。
2. 充電完了後、USBケーブルを取りはずす。

肌や身体へのトラブルを防ぐために必ずご確認ください。

- 医療用電子機器をご使用の方は、本製品の使用をしないでください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。

注意

- 充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。
●充電機は必ず充電機専用のもので充電してください。

使用する

反応テストをする




基本的なケアの方法

- イヤリング、ピアスやネックレスなど、お顔や首まわりに身につけているアクセサリーは取り外ししてください。
●メガネ、コンタクトレンズははずしてください。
●本製品は、清潔な状態での使用をお願いいたします。
●美容オイルなど油分を含む化粧品、メイクアップした状態では使用しないでください。




1. 電源ボタンを長押しして、電源ONにする

2. MODE切り替えボタンを短押しして、モードを選ぶ

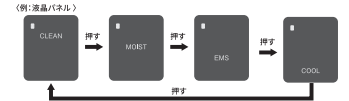

3. レベルボタンを押して、レベルを選ぶ

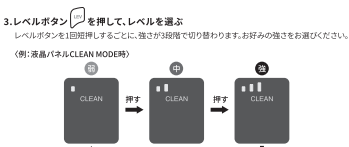

4. 肌にあてて、ケアをおこなう



5. ケア終了後、電源ボタンを長押しして、電源をOFFにする



6. 肌の状態を判定する

- 肌の状態を判定する。肌の状態を判定する。肌の状態を判定する。

各モードごとのお使用方法

(モードとおすすめ化粧品一覧)

Mode table with columns: Mode, Usage Frequency, Operation Time, Cotton, Skincare. Modes include CLEAN MODE, MOIST MODE, EMS MODE, COOL MODE.

- 肌の状態を判定する。肌の状態を判定する。肌の状態を判定する。

CLEAN MODE

●使用頻度: 週2回程度/動作時間: 約95分

- ①コットン用リングを本体から取りはずし、ヘッドに装着し、水道水または硬水を含むお湯を洗面槽に注ぎ、コットンリングをすすぎます。
②コットン用リングがヘッドの両側の形状を合わせ、コットンを固定するようにおこなってください。
③本製品はCLEAN MODEに設定し、清潔な洗面槽に顔を浮かすように動かします。

MOIST MODE

●使用頻度: 毎日/動作時間: 約95分

- ①スキンケア(化粧水または美容液)後のお顔に薄らさるように動かします。

EMS MODE

●使用頻度: 毎日/動作時間: 約95分

- ①スキンケア(化粧水または美容液)後のお顔に薄らさるように動かします。

COOL MODE

●使用頻度: 毎日/動作時間: 約95分

- ①スキンケア(化粧水または美容液)後のお顔に薄らさるように動かします。

EMS MODE

●使用頻度: 週2回程度/動作時間: 約95分

- ①スキンケア(化粧水または美容液)後のお顔に薄らさるように動かします。

COOL MODE

●使用頻度: 毎日/動作時間: 約95分

- ①スキンケア(化粧水または美容液)後のお顔に薄らさるように動かします。

製品仕様

Product specifications table including size, weight, power input, output, battery capacity, and operation time for various modes.

保証書

- 1. 保証期間内に本製品の修理の費用と運送費を負担した上で、修理費用が保証額を超える場合は、修理費用は保証額を超過するまで保証いたします。
2. 保証書が破損した場合は、お手持い商品と一緒に入庫用のシールを貼付していただく必要がございます。

お手入れ・保管方法

- 使用後は必ずお手入れして清潔にしてください。
●お手入れはUSBケーブルをし、本体の電源をOFFにした状態でおこなってください。

1. コットン用リングを取りはずす

- 綿花が柔らかくなった場合は、化粧水や美容液、ジェルを追加してください。

2. 乾いた布がティッシュ、綿花などでヘッド部分やコットン用リングに残った汚れを拭き取る

- 本製品は防水仕様ではありません。水洗いしないでください。

3. コットン用リングを取りつけない保管する

5. 故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
○充電されているか確認してください。
○充電機に接続しているか確認してください。
○充電機が対応機種でない、正しいケーブルが接続されているか確認してください。

- 充電しても使用時間が極端に短い
○充電機の種類や容量を確認してください。

- 肌へのアプローチが強く・強く感じる
○お肌の状態にあわせてレベルを調整してください。
○EMS MODEが設定されている場合は、化粧水または美容液、ジェルをしりょうしてから動かしてください。

- 使用中で停止した
○モード切り替えの操作をした場合、CLEAN、MOIST、EMS MODEが約95分、COOL MODEが約95分以内で動作がOFFになります。