

LED FACIAL MASK

LEDフェイスマスク

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。



内容物

- ① LEDフェイスマスク本体×1台
- ② 取扱説明書兼保証書×1部

△ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。

【対応USBケーブル】USB Type-A to Type-Cコネクタのケーブル
【対応ACアダプタ】USB Type-Aポートを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

△ 肌や身体へのトラブルを防ぐために必ずご確認ください。

● 医療用電子機器をご使用の方は、本製品の使用をしないでください。

- ・ペースメーカー、人工心臓などの生命維持用電子機器を使用している方
- ・心電計などの装着型医療機器を使用している方
- ・医療用電子機器の誤作動をまわくおそれがあります。

● 次の疾病に該当する方は、使用しないでください。

- ・血圧異常(治療中)の方
- ・血中酸素(患部)低下(血友病など)の方
- ・有熱性疾患の方
- ・悪性腫瘍の方
- ・感染症(皮膚、伝染病)の方
- ・知覚障害・感覚障害をお持ちの方、また意思表示ができない方
- ・顔面神経麻痺の方
- ・光過敏症の方
- ・顔面や眼科的後遺症をお持ちの方
- ・光による反応などで、てんかん発作を引き起こす可能性がある方
- ・妊娠中または妊娠している可能性がある方や授乳中の方
- ・薬を継続して服用されている方 など
- ・お肌や身体に異常を引き起こすおそれがあります。

● 次のお肌のトラブルをお持ちの方は、使用しないでください。

- ・アトピー性皮膚炎などの皮膚炎をお持ちの方
- ・アレルギー、金属アレルギーをお持ちの方
- ・敏感肌や、太陽光に肌荒れを起こしやすい方
- ・切り傷や、かぶれ、かさかさなどが化膿しているなど、お肌に炎症がある方
- ・顔部分の外科手術(形成、美容など)をされた方
- ・紫斑のある方 など
- ・お肌のトラブルを悪化させてしまうおそれがあります。

● 次に該当する方は、使用をしないでください。

- ・飲酒をされた方
- ・体調がすぐれない方
- ・繊維穿入などの悪影響を誘発する恐れがある方
- ・日焼けをして皮膚が赤い方
- ・眉毛ワックス・眉毛染めやダメージメイク中、または炎症が起きている方
- ・タトゥーがある方 など
- ・思わぬ事故やお肌のトラブルを引き起こすおそれがあります。

お肌や身体に異常を引き起こすおそれがあります。
上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は、医師にご確認ください。

安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

行為を指示する内容

行為を禁止する内容

警告

- **イヤリング、ピアスやネックレスなど、顔や首まわり身に着けているアクセサリーは取りはずす**
思わぬ事故の原因につながるおそれがあります。
- **メガネ、コンタクトレンズは取りはずす**
思わぬ事故の原因につながるおそれがあります。
- **睡眠時に使用しない**
思わぬ事故の原因につながるおそれがあります。
- **入浴中や濡れた顔に使用しない**
本製品は防水・防湿性ではありません。感電・火災につながるおそれがあります。
- **分解・改造・修理しない**
故障の原因がおそれがあります。
- **火に投入したり、加熱しない**
火災・けがを負うおそれがあります。
- **水につけたり、濡れた手で触らない**
本製品は防水・防湿性ではありません。感電・火災につながるおそれがあります。
- **次のような異常が見られた場合、ただちに使用を中止する**
本体やケーブル線に発熱・変形・変色・異音・臭い・火花・異常な動作しない・正常に動作しない
本体やケーブル線に発熱・変形・変色・異音・臭い・火花・異常な動作しない・正常に動作しない
感電・感電につながるおそれがあります。
- **次のような場所で使用・保管・放置しない**
水気のある場所・直射日光が当たる場所・火気の近くや可燃性のもの近く・雷が降っているとき
直射日光の当たる場所・炎天下の車内など高温になる場所や熱気こもる環境 など
感電・感電につながるおそれがあります。
- **じょうたんなど熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で使用・充電・保管しない**
感電のおそれがあります。
- **LEDライトを直視しない**
視力や目にたいして悪影響につながるおそれがあります。

使用中にお肌のかゆみやひりつきなど、異常を感じたら、ただちに使用を中止するお肌のトラブルを引き起こすおそれがあります。

乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない
感電・損傷など思わぬ事故につながるおそれがあります。

USBケーブル(別売)は確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは火災・感電・故障するおそれがあります。


PD (Power Delivery) 対応の充電機器を使用しない
火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブル(別売)は必ず
所定の充電機器から取り外しください。感電・感電・感電によるおそれがあります。
過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

注意

- **病院内、医療用機器の近くで使用しない**
本製品の電気がペースメーカーや医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。
ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用に当たって医師にご相談ください。
- **投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない**
故障・破損のおそれがあります。

各部名称

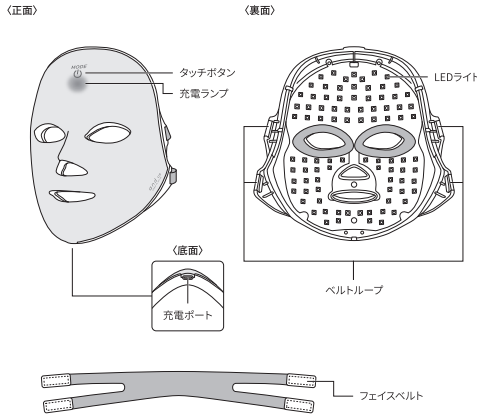


充電する

- はじめに使用する際はあらかじめ充電をおこなってください。
- 充電機にUSBケーブル(別売)を充電機に挿し込んでおいてください。
- 充電機は本製品の電源をONにしてください。

1. USBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する

USBケーブル(別売)を本製品の充電ポートとACアダプタ(別売)に接続するとLEDが赤色に点滅し、充電がはじまります。電池残量0%の状態から約2時間で満充電になります。

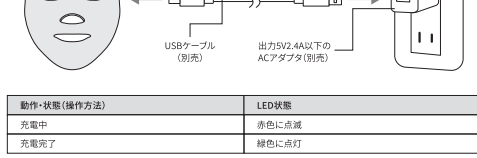

動作・状態(操作方式)	LED状態
充電中	赤色に点滅
充電完了	緑色に点灯

2. 充電完了後、USBケーブル(別売)を取りはずす

充電が完了しLEDが緑色に点灯する。または所定の充電時間になったら本製品からUSBケーブル(別売)を取りはずしてください。

- **ニコニコの方向に注意し、しっかり接続してください。**
※過度な充電は発熱・発火の原因となります。
- **充電中は必ず充電機から取りはずさないでください。**
※充電機は本製品の充電専用機ではありません。
- **充電機は必ず充電機から取りはずさないでください。**
※充電機は本製品の充電専用機ではありません。
- **充電機は必ず充電機から取りはずさないでください。**
※充電機は本製品の充電専用機ではありません。

お手入れ方法

- お手入れはUSBケーブル(別売)をはずし、本体の電源をOFFにした状態でおこなってください。
- 使用後は必ず、水で濡らした柔らかい布で拭きマスクを清潔に保ってください。
- 本製品は防水・防湿性ではありません。水濡れをしないでください。
- ペンシリンジャー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

ご使用上の注意

- 本製品を使用する場合は、必ず清潔な状態で使用してください。
- お肌に異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。
- 本製品を使用中に体調が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品は家庭用です。家庭用以外の使用はしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品を自身以外の方と共有して使用しないでください。感染症を引き起こすおそれがあります。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。
- 本製品を長時間充電しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなる。充電できないおそれがあります。
- 充電中、本製品の充電ケーブルを触ると熱が伝わりますが、これは正常な現象です。ただし、やけどをさせるなどの熱を感じた場合や充電時間以外に熱を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

※本製品の保証期間に記した使用機器の故障・故障などに関して、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用による故障の責任は、本製品購入代金を上回るものではありません。
※本製品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただきます。ご了承ください。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標となります。
※イラストはイメージです。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
- 濡れた場合は直接触れたり、口に入れてください。万が一、濡れた目に入った場合は、ただちに水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。


弊社の回収をご希望の場合は下記のご住所にお客様のご負担(元払い)でお送りください。
〒653-8835 兵庫県神戸市長田区船場町1-3-20
L-Ion コーポレーション株式会社 リチウムイオン電池リサイクルセンター 宛

△ 使用前にご確認ください。

- 本製品をご使用にあたって、お肌に異常がないか顔の内側などでテストをおこなってください。テスト中に異常が見られる場合はただちに使用を中止してください。テスト後はしばらく時間を置いて、お肌や身体に異常がないかご確認ください。
- イヤリング、ピアスやネックレスなど、顔や首まわり身に着けているアクセサリーは取りはずしてください。
- メガネ、コンタクトレンズは取りはずしてください。
- 洗顔後、水気を拭き取った何もつけていない状態でお使用してください。
- 本製品・顔は清潔な状態で使用してください。

本製品を装着する

1. 本製品の左右にあるベルトループに、フェイスベルトを通して取り付けます。
顔部のサイズを確認しながら、フェイスベルトの長さを調整してください。
2. 本製品の上下・A位置を確認しながら、顔に装着してください。

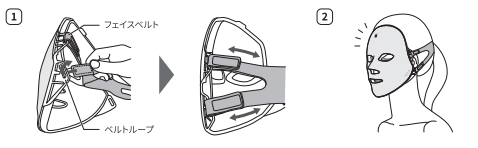

※フェイスベルトをきつく締めると、顔、眼球を圧迫しないようにしてください。またフェイスベルトがゆるくなった場合、顔が崩れやすくなる、頬や頬骨に当たるなど、顔に負担がかかるおそれがあります。
※髪をフェイスベルトに挟まないようにご注意ください。

本製品を操作する

タッチボタンを約3秒間押しすると、電源ON/OFF操作をおこなえます。

動作・状態(操作方式)	LED状態
電源ON(タッチボタンを約3秒間押し)	緑色に点灯
カラー変更(タッチボタンを短く回す)	青色に点灯
電源OFF(タッチボタンを約3秒間押し)	消灯

■ カラー変更操作

本製品のタッチボタンを短く回すたびに、(赤→青→黄→紫→黄→赤→白)の順に切り替わります。本製品の電源をOFFにする。赤にリセットされます。



赤LED(波長630nm)	毎日の肌ケアトリートメントに	黄LED(波長590nm)	ストレスを受けたお肌に
緑LED(波長520nm)	外出で紫外線を浴びた後のお肌ケアに	水色LED(波長480nm)	うるおいサポート
青LED(波長470nm)	すやかなお肌へ整える	白色LED(波長390nm~780nm)	お肌のコンディションをサポート
紫LED(波長400nm)	お肌の夜ケアに		

※LEDの光を直視しないでください。
※電源ONは、約15分で自動的に電源がOFFになります。

故障かな?と思ったら

- **電源が入らない**
 - 本製品が充電されていないかご確認ください。
 - 充電機器に接続がないかご確認ください。
 - 充電機器が対応機器であり、正しく充電されているかご確認ください。
- **充電しても使用時間が極端に短い**
 - 内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。

製品仕様

サイズ	φ径(4)22.8cm×縦(φ)18.3cm×奥行き(φ)13.5cm	LEDランプ灯数	90個
重量	φ260g	LEDカラー	7色
入力電圧	5V1A	連続使用時間	約3時間
定格電力	2W	充電時間	約2時間
バッテリー	リチウムイオン電池	材質	ABS樹脂
バッテリー容量	350mAh	防水性能	なし
		充電ポート	Type-Cポート搭載

※本製品はフェイスマスクであり、医療機器の効果はございません。
※数値の数値は使用環境により変動します。

保証書

1. 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理などをさせていただきます。ただし、**ご購入後はお買い上げのシールと本保証書を一緒に保管してください。**
2. 保証を受けたい場合は、お手元の商品と**ご購入時のシール**を用意いただき、この取扱説明書をごよくご覧になり、正しくお使いください。
3. 保証期間内でも下記の内容は保証を受けられません。ご留意ください。
・本体およびご購入時のシールがない
・本体に購入日、お買い上げ店名等の記載がない。あるいはご記入いただいた内容に相違がある
・お買い上げ先から本取扱説明書の表示内容と相違がある。または落下などの外的衝撃がある
・天災や公害などによる故障および損傷
・付属品の破損や紛失
・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
4. 本書は再発行できませんので大切に保管してください。
5. 日本国外への配送対応は行っておりません。
6. 商品保証はご購入日から**6ヶ月**となります。